

Tiskárna na mikroskopická sklíčka DAKEWE S200

PŘEHLEDNOST

Tiskárna má **automatický podavač** ze 2 zásobníků, každý s kapacitou až 100 skel. Zásobníku mohou být plněny různými typy i barvou skel.

Automaticky vybírá zásobník/barvu podle požadované tkáně.

Ovládací software je přehledný a intuitivní. Tiskárnu lze propojit s laboratorním systémem a tisk na skla provádět přímo z laboratorního systému.

TISK

S200 má **integrovaný počítač** a **velký dotykový displej**. K jejímu provozu tak není nutné žádné další zařízení.

K tiskárně se dá připojit **čtečka čárových kódů** a požadovaný podklad pro tisk snímat přímo z žádanky opatřené QR, čárovým nebo jiným strojově čitelným kódem. **Minimalizuje se tak možnost lidské chyby**



IVD zdravotnický prostředek

VYBAVENÍ

S200 má **integrovaný počítač** a **velký dotykový displej**. K jejímu provozu tak není nutné žádné další zařízení.

K tiskárně se dá připojit **čtečka čárových kódů** a požadovaný podklad pro tisk snímat přímo z žádanky opatřené QR, čárovým nebo jiným strojově čitelným kódem.

Minimalizuje se tak možnost lidské chyby.

ŽÁDNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tiskárna ke své funkci nevyžaduje **žádný spotřební materiál**, požadovaný tisk je do sklíček vypalován.

Výsledný tisk je tak vysoce odolný všem běžně používaným kyselinám/alkalickým látkám, xylenu, formalínu, korozi alkoholem a vůči otěru. **Je kompatibilní s většinou lakovaných sklíček.**

PROVOZNÍ PARAMETRY

Napájecí napětí a frekvence

Příkon

Rozsah provozních teplot

Úroveň hlučnosti

Výkon laseru

100-240VAC, 50/60 Hz

210 VA

+10°C to +35°C

< 65 db (A)

<5 W

PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Systémové jazyky

Počet a kapacita vstupních zásobníků

Kapacita výstupního zásobníku

Rozsah kompatibilních velikostí skel (D x Š x V)

Kompatibilní operační systém

Velikost displeje

Rozlišení obrazovky

Hardwarové rozhraní

Systémové rozhraní

Angličtina, čínština

2 zásobníků, každý až 100 ks skel

50 ks skel

(74,8 – 75,8) x (24,8 - 25,9) x (0,98 – 1,2) mm

Windows 7, Windows 10, Windows 11, Linux

8 palců

800x1280

2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x LAN

Možné připojení na LIS, HIS, PIS, PACS

PARAMETRY TISKU

Technologie tisku

Rychlost tisku

Obsah potisku

Maximální rozlišení tisku

Technologie bezkontaktního laserového značení

Nejvyšší rychlost až 5 s/sklíčko (v závislosti na obsahu potisku)

Datové matice, lineární čárové kódy, QR kódy, čínská a anglická písmena, znaky, čísla i symboly

2500 dpi


ROZMĚRY A HMOTNOST

Velikost bez obalového materiálu

Hmotnost prázdného stroje bez obalu

440 x 240 x 450, ±5% mm

Přibližně 32,5 Kg

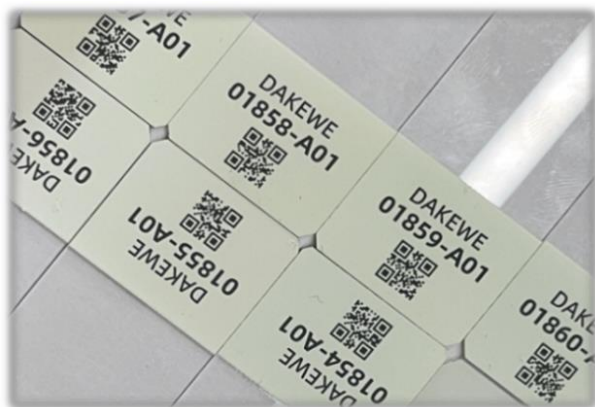

Velikost písma lze nastavit podle potřeby a velikosti tisknutelné plochy.

S přečtením popisku tak již nebudou mít problém ani osoby se zhoršeným zrakem.

Zastoupení v České republice:

Life M s.r.o.

Voděradská 2552/16, Říčany u Prahy

E-mail: info@lifem.cz

www.lifem.cz | www.lifem.sk | www.lifem.eu



Naskenuj mě